

SHENPIX®

シェンペクス電界医療機器

NX9000

Electric Field
Medical Equipment
For Home & Office Use

SHENPIX



慢性の便秘、頭痛、肩こり、
不眠症がスッキリ!

最大9000ボルトの快適通電で、
2人同時に治療できるNX9000。
家族みんなで、効率よく活用できます。



どうしていろいろな 症状に効くのか。 ご存じですか？ 電界療法の原理と効能。

身体に高電圧(たとえば9000ボルト)を負荷して、室内の壁や床との間に電位差(通常0ボルト)をつくると、身体の周囲に電界が生まれます。この電界パワーによって、身体のなかから症状を治療するのが電界医療機器です。

シェンピクスのトップクオリティが活かされた電界医療機器は、医療機関やオフィス、ご家庭にも普及し、アジア各国でも活用されています。

Principles & E

5年間で、12万台!



シェンピクスの電界医療機器

シェンピクスの電界医療機器は、1日15分からの使用で、身体の内側から無理なく自然に治療する、21世紀の必需品。5年間で12万台を超えるご愛顧いただき、その販売台数においてトップクラスを極めていきます。

□ 全身刺激で全身治療を

電界医療機器は、いわゆる物理療法機器の一種ですが、その最大の特長は全身治療にあります。多くの物理療法機器が、温熱・光線・磁気等を用いて、肩・ヒジ・ヒザといった局所の血行促進や痛みの緩和をはかるのに対し、電界医療は、全身に働きかけて4つの症状を同時に治療します。NX9000は、最大9000ボルトという、当社の医療専用モデルと同出力の性能を有した高出力で人気のモデルです。

E(kV/m)

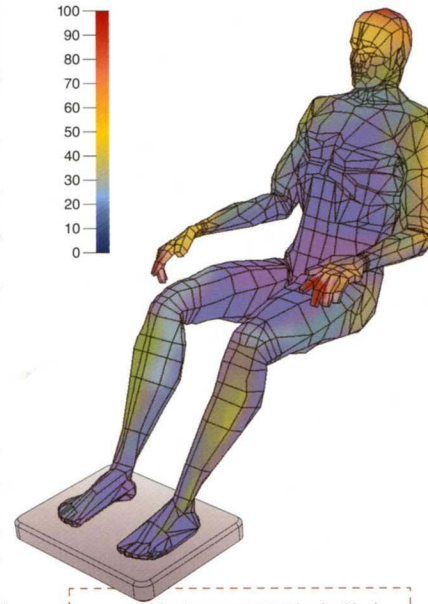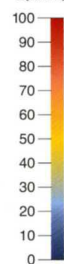

体表面電界強度分布

体表面における電界強度の分布をコンピュータ・シミュレーションした結果。身体各部分で電界強度が異なります。(研究協力: 北海道大学大学院工学研究科)

効き目のヒミツ!

電界療法の作用機序

「電界」を身体の周囲に発生させ、循環血液中のナトリウムとカルシウムイオン化量を正常化させることで治療するのが、電界医療機器です。医薬品や手術などによって病気を治療する西洋医学に対して、電界療法は、健康に深刻な異常をきたす前に症状を積極的に治療する物理療法です。

□細胞レベルからも

国連の専門機関・世界保健機構(WHO)の論文(環境保健基準第35巻/1984年より)では、電界には、2つの生体への作用があるといわれています。

- ①体表面に作用する電界による、体表面の感覚受容器への刺激作用
- ②体表面の電界により生体内に誘導される電流による、細胞レベルからの作用

effects

どなたにも!

家庭でできる電界療法

安全な交流高圧電位が創り出す電界空間が全身を包み込んで、身体の内側から全身へと働きかけます。ほとんど電流は流れませんので、ピリッとするような刺激もなく、お子さまからご高齢の方まで安心してお使いいただけます。

□安全だから安心

電界という物理的刺激に誘発される身体の中の反応は、身体自体の生理的な反応です。つまり、適切な刺激は、薬物のように長時間体内に貯留することはないので、安心です。シェンペクスでは、各種学術学会・研究機関・医療機関との産学協同によるアカデミック・マーケティングを基本に、信頼と安心の製品づくりを行っています。



こんなつらい症状に!

厚生労働省 承認の効能効果

NX9000は、厚生労働省の製造承認を受けた、信頼性の高い確かな製品。現代社会に多く見られる慢性の便秘・頭痛・肩こり・不眠症・という、4つのつらい症状に対して効能効果が認められています。

慢性の便秘に!

食生活の乱れや運動不足、緊張なども便秘の一因。規則正しい生活と適度な運動が大切です。



頭痛に!

肩こりや不眠、ストレス、緊張なども頭痛の原因。OAストレスによる頭痛も社会問題化しています。



肩こりに!

筋肉疲労による血行不良、長時間のデスクワークによる筋肉ストレスなどが主な原因です。



不眠症に!

寝つきが悪い、眠りが浅い、夜中に目が覚めるなどが一般的な症状。気力・体力も減退します。



【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215




リビングで



- ◎テレビを見ながら。
- ◎おしゃべりを楽しみながら。
- ◎読書をしながら。
- ◎ソファに横になって。

ダイニングで

- ◎テーブル
- ◎机上
- ◎家事

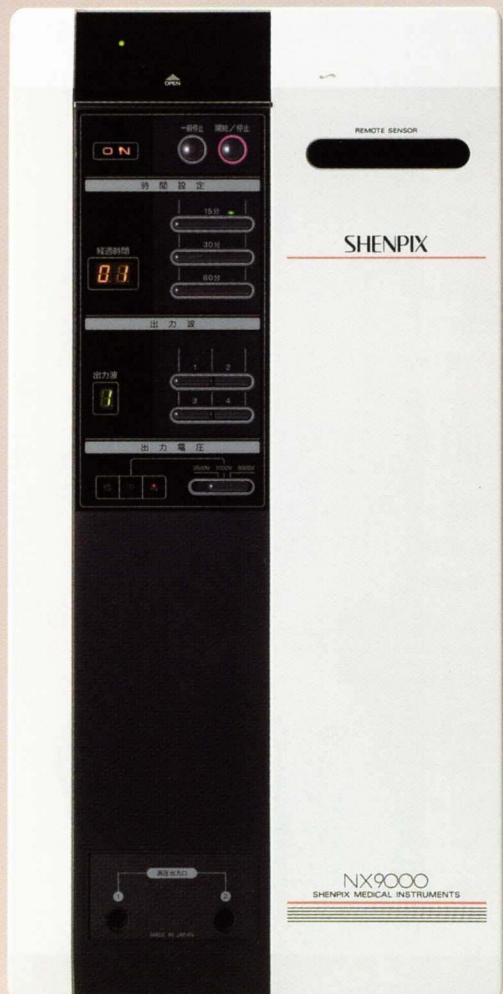


ファミリーモデル「NX9000」なら、
2人同時に電界療法。
ご家族でご利用いただけます。

座って
使用する場合



通電方法


横になって
使用する場合

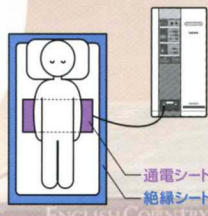

2人で座って
使用する場合



2人で横になって
使用する場合

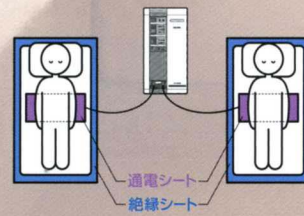

※お二人同時にご利用いただく場合は、別売品が必要となります。



電界療法Q&A

よくあるご質問から

Q1: 取付工事は必要ですか?

A1: 必要ありません。ご家庭のコンセントにつなぐだけなので、どのお部屋でも、お好きな場所をご利用いただけます。

Q2: 通電時間はどれくらいがベストですか?

A2: 初めてお使いになる場合は低電圧・短時間から始めてください。1日15分、週1回からを目安に、体調に合わせて、通電回数と通電時間を決定しましょう。効果的な治療や再発の防止には、毎日続けてご使用いただくことをおすすめします。

Q3: 電気代はどれくらいかかりますか?

A3: 消費電力は14.5Wとごくわずかです。たとえば、毎日2時間使用したとしても1日あたりの電気代は1円以下と経済的です。

気分やスペースに合わせて、使い方いろいろ。

寝室で





タイムにお友達と一緒に
で作業をしながら
の合間のひと休みに

※通電プレートは別売品です。

- ◎ベッドでリラックスしながら
- ◎就寝前にタイマーをセットして
- ◎眠る前の習慣として

プレートとシートを併用する場合

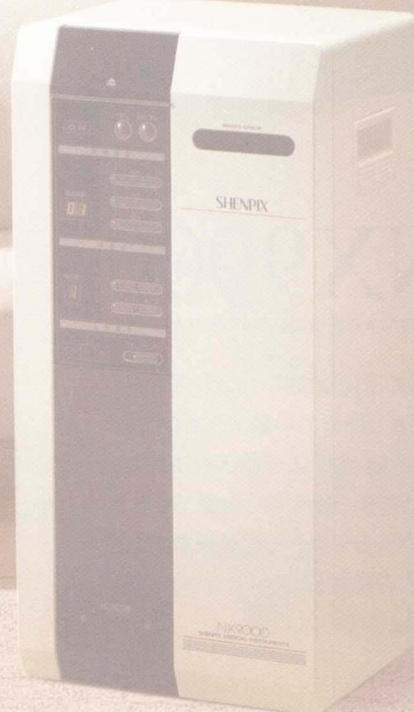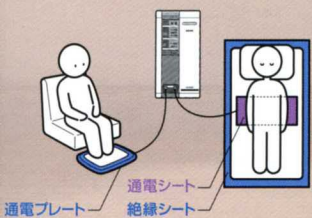

多彩なパターンで、ハイパワー出力。 操作もカンタンな人気の高性能。

お子さまからご高齢の方まで気軽にご利用いただける、汎用性の高い人気モデルです。独自のパワフル出力が、最大限の治療効果を発揮。12種類もの出力



12種類の組み合わせから、好きなパターンを選んで快適通電。

3種類の出力電圧(低:3500V、中:7000V、高:9000V)と4種類の出力波(1~4)を組み合わせると、計12種類



の出力パターンを設定できます。同電圧でご使用の場合は、一週間ごとに、出力波を変えながらご利用ください。通電に対する身体の慣れを防ぎ、治療効果を高めます。

タイマーで自動的にスイッチオフ。 切り忘れを防いで、安心通電。

オフタイマーは、15分、30分、60分の3種類。読書やおしゃべりについて夢中になっても、通電中に眠ってしまっても安心です。



リモコンで、 座ったまま簡単操作。

本体から5m以内なら、リモコンでラクに操作ができます。通電を始める時も、中断したい場合も、座ったまま操作ができるので便利です。

NX9000

医療用具承認番号◎16200BZZ01932000

当社の医療機関向けの理学診療用モデルと同出力の最大9000ボルトという出力電圧を誇るNX9000。2人同時に効率よく治療できます。シンプルなデザインと使いやすい操作性で、ご家庭はもちろん、オフィスでも活用されています。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
出力電圧	3500V・7000V・9000V
消費電力	14.5W
外形寸法	幅308 × 奥行240 × 高さ608(mm)
総重量	12.5kg

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215

パターンが、通電に対する身体の慣れを
防いで、効率的に治療します。操作もリモ
コンで簡単に。くつろぎながら、快適な通電
が行えます。



シートセット

標準価格 395,000円(税込)

<本 体><付属部品>

- 通電シートB
- 通電シートカバーS
- 絶縁シートF
- 高圧コードB
- コードリフターF(6個)
- リモコン送信機NX
(単4乾電池2個)
- 電界式検電器
(単4乾電池2個)
- 電源コード

別売品

<追加セットS>

24,150円(税込)

- 通電シートB
- 絶縁シートF
- コードリフターF(6個)
- 通電シートカバーS
- 高圧コードB

<通電プレートS NXセット>

29,400円(税込)

- 通電プレートS
- コードリフターF(6個)
- 絶縁パッド(4個)
- 高圧コードB

<集中通電シート セット>

(SHE-20S)

31,290円(税込)

- 集中通電シート (FAE-21)
- 集中通電シートカバーS (SHE-22S)

<高圧延長コードセット>

4,200円(税込)

- 高圧延長コード3m
- コードリフターF(6個)

※高圧延長コード5m (コードリフターF:9個)のセットもございます。

NX9000保証期間

本体10年/付属品2年

保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管してください。

※本製品の仕様・デザインは改良により、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。※分割払いもご利用できます。※商品写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

シェンペクスの品質と安全に対する姿勢です。

厚生労働省の認可製品であるNX9000は、グローバル・スタンダードに基づく品質システムのもと、国や業界団体発行の信頼性ある認証を取得しています。

医療機器の品質保証国際規格
ISO13485
電界医療機器の設計・開発・製造及び付帯サービスについて「ISO13485」の認証を取得しています。

(財)電気安全環境研究所
JET 認証マーク
JETによる製品試験および製造工場検査、定期工場検査に合格しています。

登録番号: GB05/64838 登録年月日: 2005年4月27日

経済産業省
PSEマーク
経済産業省の「電気用品安全法」で規定された技術基準に適合。製品の安全性が認められています。

(社)日本ホームヘルス機器工業会
HAPIマーク
業界団体が定めた業界基準に合格。生産物賠償責任保険(PL保険)が付保されています。

通電反応について

電界医療機器をはじめお使いになる方、使用中の方、あるいは長期使用しないで、再び使いはじめる方には、体質や体調、または食事の内容などにより、まれに頭痛、だるさ、かゆみ等の症状が現れる場合があります。このような症状を通電反応といい、通

常は2、3日以内でなくなるものです。このような場合は、使用時間を短くしたり、1～2日使用を中断してからご使用ください。それでも症状が治らない場合は、他の病気の症状を示していることがありますので、医師にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

安全のために必ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されます。

危険



※次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので、使用しないでください。

- ①ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- ②心電計などの装着形の医用電気機器

※心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

注意



※身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。

※導子が濡れている場合には、使用しないでください。

※軽い刺激を受けることもあり、思わぬ事故の原因となることがあります。

※治療中の人に外部の人は触れないでください。

※軽い刺激を受けることもあり、思わぬ事故の原因となることがあります。

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ①悪性腫瘍のある人
- ②心臓に障害のある人
- ③妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- ④体温38℃以上(有熱期)の人
- ⑤急性炎症症状[倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある人
- ⑥衰弱している人
- ⑦安静を必要とする人
- ⑧脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- ⑨糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ⑩温度感覚喪失が認められる人(電熱装置をもつ機器に限る)

【お問合せは】 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215

製造・販売 | 財団法人 日本ホームヘルス機器工業会 正会員

株式会社 シェンペクス

■本社・工場

〒379-2146 群馬県前橋市公田町590番地

<http://www.shenpix.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

受付時間:月曜~金曜9:30~17:30(祝日を除く)

☎ 0120-19-7777

✉ intr@shenpix.co.jp

ご注文・お問い合わせは

販売： 株式会社 SOSネットワーク



フリーダイヤル

0120-43-5215

【土日祝も営業】

ショールーム： 東京店・千葉店・名古屋店・大阪店